



mühle pflegebetten

eine marke der werner mühle
metallverarbeitung gmbh & co. kg



PFLEGE BETTEN · MÖBEL · ZUBEHÖR

Inhalt & Produktübersicht

Pflegebetten-Serie Allegra 4-7

- Allegra 40.80 6
- Allegra living 6

Niedrigbetten 8-11

- Allegra 20.80 10
- Allegra 25.80 10
- Aldena 13.80 11

Pflegebetten Standard 12-15

- Aldena 14
- Elisa 14
- Medial 15

Hydraulisches Pflegebett

- Sina 16-19

Sitz- & Aufstehbetten 20-31

- Mobilia cura 22-23, 24
- Mobilia casa 24
- Mobilia integra 25-27
- Aktivia 28-31

Lagerungsbett

- Dekubia 32-35

Schwerlastbetten-Serie Forza 36-39

- Forza basic 38
- Forza trend 38
- Forza aktiv 39

Betteinsatz

- San Lift 40-43

Zubehör 44-53

- Nachtschränke & Beistelltische 46
- Kleiderwäscheschrank & Möbel 47
- Matratzen 48
- Aufrichter 48
- Bettleuchte 49
- Nachttischleuchte 49
- Evakuierungstuch 50
- Safety Tube 50
- Seitengitterpolster 51
- Wandabweisrollen 51
- Aufstehgriff 52
- Seitengitter, klappbar 52
- Seitengitter, feststehend 53
- Pulley 53

PFLEGE BETTENSERIE

Allegra

Das besondere Pflegebett
mit den vielfältigen Möglichkeiten

Allegra 40.80 Pflegebett

Allegra living Pflegebett

Allegra 20.80 Niedrigbett

Allegra 25.80 Niedrigbett





Allegra 40.80



Das klassische Pflegebett mit wichtigen Funktionen

Höhenverstellung von 40 – 80 cm

Klassisches Design und stabile Konstruktion zeichnen das Pflegebett **Allegra 40.80** aus. Es wird überwiegend in Alten- und Pflegeheimen sowie der häuslichen Pflege eingesetzt.

Mit der vierfach geteilten und elektrisch verstellbaren Liegefläche können Patienten eine individuelle und komfortable Ruhe- und Komfortposition im Bett einstellen. Die Betthöhe ist von 40 – 80 cm stufenlos verstellbar und ermöglicht dem Pflegepersonal eine angenehme und ergonomische Arbeitshöhe von 80 cm. Durch die stufenlos elektrische Höheneinstellung wird ein bequemer Ein- und Ausstieg ermöglicht.

Das Bett lässt sich zusätzlich in eine Komfortposition fahren, die für den Bewohner eine angenehme Sitzposition ermöglicht. Die Seitengitter sind in den Bettrahmen integriert und können mit wenigen Handgriffen abgesenkt werden.



Allegra living



Das Pflegebett mit verkleideten Rollen

Höhenverstellung von 40 – 80 cm

Das Pflegebett **Allegra living** gibt es mit verkleideten Rollen und verleiht dem Bett ein besonders wohnliches Aussehen.



Sitz- und Komfortposition

AUSSTATTUNG

ALLEGRA SERIE

Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche oder Holzlattenrost
- Liegefläche 90 x 200 cm (andere Größen auf Anfrage)
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrisch verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkellehne über Feinrastung
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- angenehme Sitz- und Komfortposition
- Funktionen sperrbar über Handschalter
- integrierte Bettverlängerung auf 220 cm
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- komplett unterfahrbar
- Höhenverstellung 40 - 80 cm
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende oder 2-geteilte Seitengitter

Allegra 40.80

- 4-Rad-zentral gebremst
- 100 mm Laufrollen
- für Patientengewicht bis 200 kg

Allegra living

- 4-Rad-zentral gebremst
- verkleidete Rollen
- für Patientengewicht bis 225 kg



Allegra 40.80

Pflegebettenserie Allegra

Allegra 40.80 · Allegra living · Allegra 20.80 · Allegra 25.80

Unsere Pflegebettenserie Allegra präsentiert sich in vier unterschiedlichen Varianten und ist somit das vielseitigste Bettenprogramm. Alle Modelle der Pflegebettenserie **Allegra** erfüllen höchste Anforderungen an die Pflege und bieten eine wohnliche Behaglichkeit. Neben dem attraktiven Design und der soliden Verarbeitung besticht die Serie vor allem durch extrem stabiles Verhalten in jeder Höheneinstellung.

Selbstverständlich sind auch alle üblichen Verstellungen wie Kopf- und Fußteilverstellung, Komfortposition, Trendelenburg / Anti-Trendelenburg (Schocklage) möglich. Neben den beiden **Allegra** Standardmodellen **Allegra 40.80** und **Allegra living** bieten wir die Pflegebettenserie auch als Niedrigbett-Varianten an wie das **Allegra 20.80** mit seiner niedrigsten Position von 20 cm und das **Allegra 25.80** mit der niedrigsten Position von 25 cm.

Beide Pflegebetten werden überwiegend zur vorbeugenden Sturzprophylaxe sowie zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen eingesetzt und schaffen somit ein patientengerechtes Umfeld mit einem sehr geringen Sturzrisiko. Für das pflegende Umfeld lassen sich alle Betten aus der Pflegebettenserie **Allegra** auf die optimale Pflegehöhe von 80 cm einstellen.

NIEDRIGBETTEN

Allegra Aldena

Zur vorbeugenden Sturzprophylaxe und Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen

Allegra 20.80	Niedrigbett
Allegra 25.80	Niedrigbett
Aldena 25.80	Niedrigbett



Allegra 20.80



Allegra Niedrigbett 20.80 - tief hinunter, hoch hinaus

Höhenverstellung von 20 – 80 cm

Das Allegra Niedrigbett 20.80 bietet eine extrem niedrige Höhe von 20 cm und eine für das Pflegepersonal ergonomische Arbeitshöhe von 80 cm. Dieses Bett ist besonders stabil verarbeitet und schwingungsarm in jeder Höhe.

Durch die extrem niedrige Liege- und Ruheposition des Patienten kann auf einschränkende und fixierende Maßnahmen verzichtet werden. Die besonders bodennahe Ruheposition im Bett von 20 cm unterstützt das Pflegepersonal und schafft Sicherheit für unruhige Bewohner.



Allegra 25.80



Der Bestseller mit dem extra stabilen Stand

Höhenverstellung von 25 – 80 cm

Das besonders stabile Allegra 25.80 sorgt für Behaglichkeit und Komfort im Alltag sowie Sicherheit und Ruhe in der Nacht. Das Pflegebett Allegra 25.80 kann auf 25 cm abgesenkt werden und bietet Patienten bis 225 kg Sicherheit im täglichen Pflegeeinsatz. Zusätzliche Positionen und Einstellmöglichkeiten wie z.B. Trendelenburg und Anti-Trendelenburg sowie Herz-Kreislauf fördernde Sitzposition (Schocklage) schaffen Möglichkeiten, den Patienten komfortabel zu lagern und bieten eine volle Unterfahrbarkeit, z.B. mit einem Patientenhilfsgerät.



Aldena 13.80



Absolute Sturzprophylaxe perfekte Arbeitshöhe

Höhenverstellung von 13 – 80 cm

Das besonders niedrige Pflegebett Aldena 13.80 trägt mit seiner tiefsten Position von 13 cm dazu bei, besonders sturzgefährdeten Patienten und Bewohnern wesentlich mehr Freiheit durch nicht einschränkende Maßnahmen zu ermöglichen, da die Höhe von 13 cm die Verletzungsgefahr stark reduziert bzw. vermeidet. Für die Pflegekräfte ist das Bett auf komfortable 80 cm Pflegehöhe einstellbar.

Gerade bei den immer häufiger auftretenden Demenz- und Alzheimer-Erkrankungen ist eine extrem niedrige Lagerungen aus Gründen der Sturzprophylaxe vor allem während der Schlafphase von großer Bedeutung.



Handschalter-Steuerung

AUSSTATTUNG

NIEDRIGBETTEN

Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche oder Holzlattenrost
- Liegefläche 90 x 200 cm (andere Größen auf Anfrage)
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrisch verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkellehne über Feinrastung
- Funktionen sperrbar über Handschalter
- integrierte Bettverlängerung (Allegra) auf 220 cm
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- komplett unterfahrbar
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende oder 2-geteilte Seitengitter
- Holzseitenverblendung bei Verwendung ohne Seitengitter

Allegra 20.80

- Höhenverstellung von 20 bis 80 cm
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- angenehme Sitz- und Komfortposition
- 2-Rad-zentral gebremst
- 50 mm Laufrollen
- für Patientengewicht bis 200 kg

Allegra 25.80

- Höhenverstellung von 25 bis 80 cm
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- angenehme Sitz- und Komfortposition
- 2-Rad-zentral gebremst
- 75 mm Laufrollen
- für Patientengewicht bis 225 kg

Aldena 13.80

- Höhenverstellung von 13 bis 80 cm
- Räder einzeln feststellbar
- 75 mm Laufrollen
- für Patientengewicht bis 125 kg

PFLEGE BETTEN

Aldena Elisa & Medial

Die Standard-Pflegebetten
mit der Grundausstattung

Aldena

Standard - Pflegebett

Elisa

Standard - Pflegebett

Medial

Standard - Pflegebett



Elisa



Aldena



Das elegante Pflegebett mit "versteckten" Motoren

Das Pflegebett **Aldena** verfügt über eine motorische Hubsäulenmechanik am Kopf- und Fußteil und ist mit einem Lifter oder einer Aufstehhilfe komplett unterfahrbar. Die viergeteilte elektrisch verstellbare Liegefläche verfügt darüber hinaus über kopfseitige Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte. Die Höhenverstellung von 30 bis 76 cm sorgt für eine Verstellung in jede gewünschte Position. Das Kopf- und Fußteil sowie die Höheneinstellung erfolgt elektrisch über den Handschalter.



Elisa



Das formschöne Pflegebett mit komfortablem Scherenhubsystem

Das formschöne Pflegebett **Elisa** wird in einer wohnlichen Holzumrandung geliefert und eignet sich besonders für den Objekt- wie auch den Homecarebereich. Zum Transport kann der Grundrahmen des Pflegebettes leicht vom Fahrwerk getrennt werden. Es verfügt über eine stabile Scherenhubkonstruktion, die eine stufenlose Höhenverstellung ermöglicht.

Die stufenlose Höhenverstellung von 42 – 80 cm bietet beste Unterfahrbarkeit und Hilfestellung für das Pflegepersonal. Es steigert die Selbstständigkeit und das Selbstwertgefühl der Bewohner.



Medial



Das kompakte Pflegebett mit der praktischen Transportversion

Das extrem solide Pflegebett Medial mit seinen vielfältigen Funktionen ist hochwertig verarbeitet und entspricht sämtlichen Anforderungen des heimischen Pflegealltages. Es bietet seinem Nutzer hohen Komfort und Sicherheit, wobei das ansprechende Design des Bettes ein wohnliches Umfeld schafft. Die viergeteilte Liegefläche ist unkompliziert über den elektrischen Handschalter verstellbar. Medial ist mit geteilter Liegefläche (als Transportversion) sowie mit durchgehender Liegefläche (für die Heimanwendung) erhältlich.

Das Pflegebett Medial ist auch als Niedrigbett-Variante erhältlich!



Transportversion

AUSSTATTUNG

STANDARD-PFLEGE BETTEN

Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche oder Holz-lattenrost
- Liegefläche 90 x 200 cm
(andere Größen auf Anfrage)
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrische verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne über den Handschalter, Unterschenkellehne über Feinrastung
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- Holz-Dekor: Buche hell
(andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende oder 2-geteilte Seitengitter
- Holzseitenverblendung bei Verwendung ohne Seitengitter

Aldena

- Höhenverstellung von 30 bis 76 cm
- Einzelradbremse (optional 4-Rad-Zentralbremse)
- 100 mm Laufrollen
- optional Bettverlängerung auf 220 cm
- optional Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- für Patientengewicht bis 125 kg

Elisa

- Höhenverstellung von 42 – 82 cm
- Einzelradbremse
- 125 mm Laufrollen
- optional Bettverlängerung auf 220 cm
- für Patientengewicht bis 135 kg

Medial

- Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- optional auch als Niedrigbett erhältlich (25 – 65 cm)
- Transportversion – Liegefläche mittig getrennt
- 100 mm Laufrollen
- Einzelradbremse
- optional Bettverlängerung auf 220 cm
- für Patientengewicht bis 150 kg

Hydraulisches Pflegebett

HYDRAULISCHES
PFLEGE BETT

Sina

Das hydraulische Pflegebett -
mechanisch, funktional, wartungsarm
und äusserst langlebig





Sina Pflegebett



Das Pflegebett ohne elektrische Komponenten

Die Technik dieses Pflegebettes ist vor allem auf extreme Stabilität, Haltbarkeit und ständige Einsatzbereitschaft ausgelegt. Dies wird vor allem auch durch seine technische Konstruktion als rein mechanisches Bett garantiert.

Die Höhenverstellung erfolgt hierbei über einen leicht zu bedienenden Fußschalter in einer sehr stabilen Konstruktion. Die Kopf- und Fußteilverstellung erfolgt ebenfalls über einen von Hand betriebenen Mechanismus eines beidseitig bedienbaren Hebels. Das gesamte Bett ist sehr leicht fahrbar durch kugelgelagerte Präzisionsrollen, wobei eine Rollenfreistellung und -bremsung in jeder Lagerhöhe möglich ist - dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis.

Das Trennen der Liegefläche vom Fahrgestell ist mit wenigen Handgriffen möglich. Aufgrund der sehr massiven und stabilen Bauweise ohne technische Komponenten ist neben der hohen Lebensdauer vor allem auch mit äußerst niedrigen Wartungs- und Folgekosten zu rechnen.

Sorgenfreiheit steht im Mittelpunkt - diese wird auch durch die Erfüllung aller Normen und ständigen Qualitätskontrollen erreicht. Doch nicht nur die Technik macht die Wertigkeit dieses Bettes aus, auch das Design kommt nicht zu kurz: bei dem wohnlichen Holzumbau sind diverse Formen und Dekore möglich, und dies mit einer optionalen Bettzeugablage.



AUSSTATTUNG

SINA PFLEGEBETT

Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche oder Holzlattenrost
- Liegefläche 90 x 200 cm (andere Größen auf Anfrage)
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- manuell verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne über Gasdruckfeder, Unterschenkellehne über Feinrastung
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende oder 2-geteilte Seitengitter

Sina

- keine elektrischen Verstellungen
- hydraulische Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- Einzelradbremse oder 4-Rad-Zentralbremse
- 125 mm Laufrollen
- optional Bettverlängerung auf 220 cm
- für Patientengewicht bis 150 kg

Pflegebett Sina

In der heutigen Zeit steht bei Neuinvestitionen in den meisten Fällen neben der Funktionalität vor allem die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, so auch im Bereich der häuslichen und vor allem der institutionellen Pflege.

Hierbei sollten alle Möbel und Hilfsmittel den Bedürfnissen von Patienten und Pflegepersonal angepasst werden. Bei der Ausstattung der Zimmer kann durchaus auf den Einsatz motorisch verstellbarer Betten verzichtet werden, wenn mechanische Betten durch ihre leichte Bedienbarkeit eine Alternative darstellen. Das Pflegebett Sina von Mühle Müller Pflegebetten erfüllt genau diesen Anspruch und besticht vor allem auch durch seine Verarbeitung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.

Sina besitzt keine elektrischen Komponenten – dies bedeutet gleichzeitig keine Energie- sowie äußerst niedrige Wartungs- und Folgekosten.



SITZ- & AUFSTEBETTEN

Mobilia

Die mobilisierenden Pflegebetten
mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten

Mobila cura

Mobila casa

Mobila integra





Mobilia Sitz- und Aufstehbett

Mobilität für den Patienten und Arbeitserleichterung für die Pflegenden

Die Auswirkungen vieler Krankheitsbilder sind oft körperliche Einschränkungen in der Mobilität. Diese betreffen vielfach den Bewegungsapparat des zu Pflegenden, Drehbewegungen sind oft nicht möglich, das eigenständige Aufsetzen im Bett fällt schwer oder ist sogar unmöglich - all dies führt so zu einer erheblichen Einschränkung der eigenen Lebensqualität.

Das **Mobilia Sitz- und Aufstehbett**, in seinen unterschiedlichen Varianten **casa**, **cura** und **integra**, gibt dem Patienten die Möglichkeit zurück, völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Bett aufzustehen und wieder wesentlich aktiver am sozialen Leben teil zu nehmen.

Drehbare Liegefläche – Neue Mobilität

Diese wird vor allem möglich gemacht durch die einzigartige Technik einer drehbaren Liegefläche. Neben all der Erleichterungen, die dieses Bett für den Patienten aufgrund seiner Einschränkungen oder Krankheitsbilder bietet, sind es vor allem auch die emotionalen Aspekte, die durch die Funktionen des **Mobilia Sitz- und Aufstehbettes** extrem gestärkt werden.

Befindet sich der Patient in der Sitzposition der gedrehten Liegefläche des Bettes, hat er nicht mehr das Gefühl, bettlägerig zu sein, sondern sich fast wie im Sessel innerhalb seines sozialen Umfeldes zu befinden - und die Möglichkeit des selbstständigen Aufstehens gibt ihm eine ganz **neue Unabhängigkeit**.

Da das **Mobilia** ebenfalls über alle Funktionen eines Pflegebettes verfügt, wird es für unterschiedlichste Erkrankungen und Behinderungen eingesetzt - neben vielen anderen wie z.B. Einschränkungen im Bewegungsablauf, Bettlägerigkeit, eingeschränkter Belastung der Lendenwirbelsäule auch zur Mobilisierung von Kreislauferkrankungen.

Für die Angehörigen, das pflegende Umfeld sowie das Pflegepersonal stellt die Pflegebettserie **Mobilia** eine wesentliche Erleichterung in der Pflege dar und für den Patienten eine erhebliche Steigerung seiner gesamten Lebensqualität. Mobilität ganz leicht – mit den Sitz- und Aufstehbetten aus der Pflegebettserie **Mobilia**.



Mobilia Sitz- und Aufstehbett

Das Bett mit der unvergleichlichen Kombination seiner Funktionen

Funktionsablauf (Mobilia casa)



1. Liegeposition



2. Kopf- und Fußteilverstellung



3. Drehung der Liegefläche um
45 Grad



4. Drehung der Liegefläche um
90 Grad



5. Sitzposition



6. Aufstehposition

Mobilia cura



Scherenhubbett Verbesserung und Steigerung der Mobilität

Die Liegefläche des Pflegebettes **Mobilia cura** dreht sich vollmotorisch aus dem Pflegebett heraus, so dass der zu Pflegenden am Bettrand sitzt und die Liegefläche optional vollmotorisch zur Aufstehhilfe angehoben werden kann. Diese Technik ermöglicht so das einfache Aufsitzen bzw. Aufstehen aus dem Bett. In der Sitzposition ist es möglich, je nach Gesundheitszustand selbständig zu essen, zu lesen, fern zu sehen oder auch Besuch zu empfangen. Mit dem **Mobilia cura** kann der Anwender sehr lange selbständig bleiben und erfreut sich einer weitreichenden Mobilität.



Mobilia casa



Frontenhubbett Volle Unterfahrbarkeit und Mobilisierung

Die vielfältigen Möglichkeiten des Pflegebettes **Mobilia casa** mit seiner drehbaren Liegefläche bieten höchstmöglichen Komfort für die Pflegebedürfnisse von Menschen mit Bewegungseinschränkungen z.B. durch Parkinson oder Muskelschwund-erkrankungen, Unfall- oder auch Schlaganfallpatienten. Das Hubsäulensystem im Kopf- und Fußteil des Pflegebettes **Mobilia casa** sorgt für eine volle Unterfahrbarkeit z.B. mit einem Patientenlifter.

Armlehnen

- klappbare Armlehne (RAL 7035), kann auch als Aufstehgriff verwendet werden
- klappbare Armlehne mit Holz-Dekor Buche hell, die bündig zur Liegefläche abgeklappt werden kann

Lieferumfang

- **Mobilia** Polyschaum-Matratze
- Jersey Spannbezug
- Aufrichter und Haltegriff
- Seitengitter und Armlehnen optional

Mobilia integra



Der Betteinsatz Mobilia integra für vorhandene Einzel- oder Doppelbetten

Die Situation der körperlichen Einschränkung kommt oft plötzlich. Der Betteinsatz **Mobilia integra** lässt sich leicht und einfach in vorhandene Betten integrieren und bietet somit die perfekte Lösung für alle, die in Ihrem gewohnten Umfeld verbleiben möchten. Durch die Nutzung eines Betteinsatzes kann in eine vorhandene Schlafzimmer-Einrichtung ein wesentliches Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit oder der professionellen Pflege eingesetzt werden und schafft darüber hinaus optimale ergonomische Bedingungen sowie wesentliche Erleichterungen für das Pflegepersonal und pflegende Angehörige.



AUSSTATTUNG

MOBILIA SERIE

Standardausstattung

- herausdrehbare Liegefläche manuell oder elektrisch mit Sicherheits-Stopp
- mit und ohne Aufstehhilfe
- Ausstiegs- und Sitzposition links/rechts frei wählbar und änderbar
- elektrische Höhenverstellung sowie elektrische Verstellung der Kopf- und Fußteile über den Handschalter
- 4-geteilte Liegefläche 90 x 200 cm Holzlattenrost (optional Stahlgitterliegefläche)
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- angenehme Sitz- und Komfortposition
- optional Bettverlängerung auf 220 cm
- auch als Niedrigbett erhältlich (Mobilia casa)
- für Patientengewicht bis 100 kg
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)

Seitengitter

- ohne Seitengitter oder durchgehende Seitengitter
- Holzverblendung bei Verwendung ohne Seitengitter

Mobilia cura

- lieferbar mit Aufstehhilfe (Mobilia cura e plus) und ohne Aufstehhilfe (Mobilia cura e)
- Scherenhubbett
- Höhenverstellung von 48 – 88 cm
- Einzel- oder 2-Rad-Zentralbremse

Mobilia casa

- lieferbar mit Aufstehhilfe (Mobilia casa e plus) und ohne Aufstehhilfe (Mobilia casa e)
- Höhenverstellung über Hubsäulensystem bietet volle Unterfahrbarkeit
- Höhenverstellung von 44 – 84 cm
- Einzelradbremse
- **auch als Niedrigbett erhältlich**

Mobilia integra

- Bett-im-Bett-System für Einzel- oder Doppelbetten
- lieferbar mit Aufstehhilfe (Mobilia integra e plus) und ohne Aufstehhilfe (Mobilia integra e)
- Scherenhubbett
- Höhenverstellung von 48 – 88 cm
- Standfüße, Einzel- oder 2-Rad-Zentralbremse





SITZ- & AUFSTEBETT

Aktivia

Das besondere Aufstehbett
mit dem praktischen Fußausstieg






Aktivia Pflege- und Aufstehbett



Sicher und schonend vom Liegen zum Stehen

Das **Aktivia** Pflegebett verhilft dem Bewohner und Patienten zur schnellen Mobilisation und einem selbstständigen Leben. Es bringt Patienten sicher und schonend in eine aufrechte Sitzposition und führt zu mehr Lebensqualität. Die schonende Mobilisierung gibt pflegebedürftigen Menschen Sicherheit und eignet sich ideal, um älteren und pflegebedürftigen Menschen die Teilnahme am Alltag zu ermöglichen. Durch das Einstellen der Sitz- und Aufstehposition kann eine ideale Positionierung des Patienten erreicht werden, die Bewegungsmuskulatur wird aktiviert, die täglichen Bedürfnisse wie Essen und Trinken werden wesentlich erleichtert.

Für die Sitz- und Aufstehposition lässt sich das Fußteil am Bett abnehmen und die mitgelieferten Haltegriffe sorgen für eine zusätzliche Sicherheit. Angehörige und Pflegenden werden bei der täglichen Arbeit maßgeblich unterstützt. Immobilen Patienten haben die Möglichkeit, sich selbstständig im Bett aufzurichten und mit sehr wenig Kraft aus dem Bett aufzustehen. Alle Positionen lassen sich elektrisch über einen Handschalter einstellen und das Bett verfährt mit nur einem Knopfdruck in die gewünschte Sitzposition. Alle anderen Funktionen wie Kopf- und Fußteil- sowie die Höhenverstellung von 40 – 80 cm lassen sich ebenfalls über den Handschalter einstellen. Durch den Einsatz des **Aktivia** Aufstehbettes werden Rücken und Gelenke der pflegenden Angehörigen sowie der Pflegekräfte geschont.

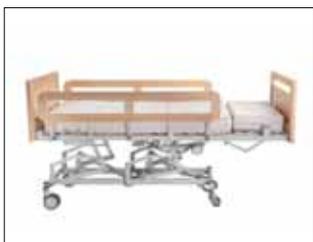

AUSSTATTUNG

AKTIVIA AUFSTEBETT

Standardausstattung

- Aufstehbett mit fußseitigem Ausstieg
- Haltegriffe am Fußende und abnehmbares Fußteil
- 4-geteilte Liegefläche, 90 x 200 cm, 100 x 200 cm oder 120 x 200 cm
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrisch verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkellehne über Feinrastung
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende, 2-geteilte oder 3/4 Seitengitter (Standard)

Aktivia

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche in Breite 90 cm, 100 cm oder 120 cm
- 2-teilige Matratze
- Höhenverstellung von 42 bis 82 cm
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- Funktionen über den Handschalter sperrbar
- Fußteil mit Matratzenhalter
- 125 mm Laufrollen
- 2-Rad-Bremse
- für Patientengewicht bis 200 kg (auch als Schwerlast-Pflegebett erhältlich)

Pflege- und Aufstehbett Aktivia

Zur Genesung oder auch der aktiven Pflege eines Patienten ist Ruhe ein wichtiger Aspekt und dient der psychischen und physischen Regeneration. Aber auch (gezielte) Bewegung gehört unabdingbar dazu.

Um dem Patienten eine weitreichende Mobilität zu ermöglichen, stellt das leichte Aufstehen aus dem Pflegebett eine wichtige Grundlage dar. Die für uns naheliegendste Aufstehform sehen wir in vertikaler Richtung. Dies vermeidet eine oft unangenehme und anstrengende Drehung des Patienten. Das **Aktivia** Pflege- und Aufstehbett erfüllt genau diesen Anspruch.



Handschalter-Steuerung

Lagerungsbett

LAGERUNGSBETT

Dekubia

Das Lagerungsbett zur
Dekubitusprophylaxe





Dekubia Lagerungsbett



Dekubitusprophylaxe durch Wechselentlastung

Im Krankheitsfalle, gerade wenn es um die Gefahr des Wundliegens geht, ist meist ein schnelles Handeln erforderlich. Das Sonder-Pflegebett Dekubia ist durch seine Bauweise mit jeder Zimmereinrichtung kombinierbar und gleichzeitig sofort in Betrieb zu nehmen.

Mittels einer über den Handschalter einstellbaren Neigung bewegt sich die Liegefläche in einem bestimmten Winkel nach links und rechts bis zu einer maximalen Neigung von ca. 17°. Hierbei liegt die Gesamtentlastung des Körpers bei 75 Prozent, wodurch eine sehr starke Entlastung der jeweiligen Körperpartien erreicht werden kann. Die Neigung der Liegefläche leistet einen entscheidenden Beitrag zur Dekubitusprophylaxe und zur Linderung bereits vorhandener Beschwerden.

Die Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne lässt sich elektrisch über den Handschalter verstellen.

Die besonderen Vorteile von Dekubia

- Verbesserung des Liegens und Schlafens durch selbstständige Lagerung, Vermeidung von Liegedruck
- Vermeidung sowie Linderung von Dekubitusgeschwüren und Infektionsgefahren
- Pneumonieprophylaxe, Atelektasen-Prophylaxe
- bessere Sekretentleerung, Drainagelagerung, sowie Belüftung aller Lungenareale
- bessere Lebensqualität durch Schmerzminderung
- bessere Verdauung
- Verminderung bzw. Vermeidung spastischer Krankheitsbilder
- Kontrakturprophylaxe
- Risikoverringering der sogenannten "Lungenembolie" durch Tromboseprophylaxe



AUSSTATTUNG

LAGERUNGSBETT



Lagerungsbett Dekubia

Dekubitus - eine schwerwiegende Folgeerscheinung bei bettlägerigen Patienten. Je nach Zustand des Betroffenen tritt dieses Phänomen oft schon nach kurzer Zeit auf und ist nur schwer behandelbar. So steht auch hier die Prävention sehr stark im Fokus. Das Pflegebett Dekubia wirkt dem Wundliegen entgegen. Eine in bestimmtem Rhythmus über die Längsachse der Matratze in beide Richtungen stattfindende Wechselbewegung entlastet wechselweise den Körper des Patienten. Somit wird die Gefahr des Wundliegens sehr stark reduziert. Die Neigung der Liegefläche lässt sich individuell auf die Bedürfnisse des zu Pflegenden anpassen. Die Steuerung über den Handschalter ermöglicht eine individuelle Wechselrhythmus-Einstellung von z.B. 30, 60 oder 90 Minuten.



Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche oder Holzlattenrost
- Liegefläche 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrische verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne über den Handschalter, Unterschenkellehne über Feinrastung
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe
- Holz-Dekor: Buche hell (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Seitengitter

- durchgehende oder 2-geteilte Seitengitter

Dekubia

- Höhenverstellung 40 - 80 cm
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- fußseitiger Ausstieg
- Netzfreeschaltung
- Einzel- oder 4-Rad-Zentralfeststellung
- Handschalter sperrbar
- komplett unterfahrbar

Lagerung

- die Neigung der Liegefläche kann individuell über den Handschalter auf die Bedürfnisse des Bewohners oder Patienten programmiert werden
- die Intervalle lassen sich zu 30 Min. , 60 Min. oder 90 Min. auf die Bedürfnisse des Anwenders einstellen
- eine Verstellung der Neigung ist auch ohne zeitliche Intervalle manuell über den Handschalter einstellbar



Handschalter Liegefläche & Schwenkung

SCHWERLASTBETTEN

Forza

Die Pflegebetten-Serie für die bariatrische Anwendung und für adipöse Patienten

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Forza basic | starkes Basismodell |
| Forza trend | Fuß- und Kopftieflage |
| Forza aktiv | Sitz- und Aufstehbett |





Forza basic



Forza basic

Das starke Basismodell

Das **Forza basic** stellt das Standardmodell unserer Pflegebettenserie **Forza** dar. Das Schwerlastbett hat eine über Hand-schalter elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne und ist in der Höhe von 40 - 80 cm verfahrbar. Seine sehr stabile und schwingungsfreie Bauweise ermöglicht alternative Nutzlasten von 250 kg, 350 kg oder 500 kg.

Das **Forza basic** ist standardmäßig mit durchgehenden und optional mit 2- geteilten Seitengittern lieferbar.

- Standard-Dekor: Buche hell
- andere Dekore auf Anfrage möglich



Forza trend



Forza trend

Fuß- und Kopftieflage
(Trendelenburg / Anti-Trendelenburg)

Zusätzlich zur Standardversion **basic** besitzt das **Forza trend** eine **Trendelenburg-Funktion** (Kopftieflage/Fußtieflage-Einstellung) und überzeugt durch seine stabil ausgelegte Konstruktion.

Es besitzt alle Standardfunktionen eines Pflegebettes und lässt sich in der Höhe individuell von 40 bis 80 cm verstellen.

Auch das **Forza trend** ist ideal für den Pflegealltag adipöser oder übergewichtiger Personen geeignet.



Forza aktiv



Forza aktiv

Das Sitz- und Aufstehbett mit fußseitigem Ausstieg

Die Pflege und Betreuung von übergewichtigen Pflegebedürftigen oder an Adipositas erkrankten Menschen ist oft mit einem erhöhten Behandlungsrisiko und einem großen Aufwand für die Pflegekräfte verbunden.

Pflegebedürftige Menschen mit einem Körpergewicht von 150 kg und mehr sind im Pflegealltag häufig keine Ausnahme mehr. Dies birgt auch für die Pflegekräfte besondere Herausforderungen, da Standard-Pflegebetten oder auch Hilfsmittel und deren zugelassene Belastbarkeit oft nicht ausreichen.

Die Pflegebettenserie **Forza** mit den Varianten **basic**, **trend** und **aktiv**, einer Belastbarkeit von bis zu 500 kg sowie den zahlreichen Verstellmöglichkeiten eines "normalen" Pflegebettes bietet in dieser Situation die perfekte Lösung und erleichtert den Alltag für pflegende Personen sowie den Patienten enorm.

Neben den besonderen Eigenschaften der **Forza** - Serie besticht das **Forza aktiv** vor allem durch seine Möglichkeit einer Sitzposition mit frontseitigem Ausstieg.



AUSSTATTUNG

FORZA SERIE

Standardausstattung

- 4-geteilte Stahlgitterliegefläche 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und 120 x 200 cm
- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- elektrisch verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkellehne über Feinrastung
- Holz-Dekor: Buche hell, (andere Dekore auf Anfrage)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- fahr- und bremsbar in jeder Lagerhöhe

Seitengitter

- durchgehende, 2-geteilte oder 3/4 Seitengitter

Forza basic

- Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- elektrische Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehne, Fußteil über Feinrastung
- 4-Rad-Zentralbremse
- 125 mm Laufrollen
- für Patientengewicht bis 200 kg oder 350 kg

Forza trend

- Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- elektrische Verstellung der Rücken- und Oberschenkellehne, Fußteil über Feinrastung
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- für Patientengewicht bis 200 kg oder 350 kg

Forza aktiv

- Höhenverstellung von 42 bis 82 cm
- Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
- Sitz- und Aufstehposition
- abnehmbares Fußteil
- Haltegriffe
- 125 mm Laufrollen
- 2 x 2-Rad-Bremse
- für Patientengewicht bis 250 kg

Betteinsatz

BETTEINSATZ

Sanlift

Der Verwandlungskünstler für
Ihr bestehendes Bett





Sanlift Betteinsatz



Der Verwandlungskünstler für Ihr bestehendes Bett

Innerhalb von wenigen Minuten wird das bestehende Doppelbett zum Komfort- und Pflegebett. Man entfernt die Liegefläche einer Seite des Bettes und ersetzt diese durch den Betteinsatz **Sanlift**. Durch die vollkommene Integration des Systems entsteht keine optische und funktionelle Einschränkung.

Vorteile, die Ihnen der Betteinsatz **Sanlift** bietet:

- das gemeinsame Schlafzimmer kann weiterhin genutzt werden
- je nach Wunsch kann der Betteinsatz entweder nur in einem oder in beiden Betten eingesetzt werden
- die Höhe der Liegefläche kann so verstellt werden, dass ein bequemes Ein- und Aussteigen aus dem / in das Bett möglich ist
- die Verstellbarkeit der Kopf- und Fußteile garantiert eine angenehme Sitzposition z.B. zum Essen oder Lesen und unterstützt die Arbeitsbedingungen für das pflegende Umfeld
- dieser Betteinsatz kann als Pflege- sowie als komfortables Seniorenbett mit all seinen angenehmen Funktionen eingesetzt werden - und das ohne Einschränkung
- durch die Verwendbarkeit nahezu aller handelsüblichen Bettgestelle kann dieses Bett dem wohnlichen Umfeld und damit dem eigenen Geschmack angepasst werden

Sanlift Hebesystem



Hebesystem mit Höhenverstellung

von 40 – 80 cm – kostensparend und flexibel

Durch den Einsatz des **Sanlift** Hebesystems, auf den Ihr eigener bzw. ein handelsüblicher Lattenrost befestigt werden kann, schaffen Sie sofort mehr Komfort und wohnliche Behaglichkeit. Durch den Einsatz des **Sanlift** Hebers erzielen Sie eine Höhenverstellung von 40 – 80 cm.

In Verbindung mit einem elektrisch verstellbaren Lattenrost haben Sie zudem die Möglichkeit der Kopf- und Fußteilverstellung.



AUSSTATTUNG

SANLIFT BETTEINSATZ



Betteinsatz Sanlift

Krankheiten, Unfälle, Pflegesituationen kommen oft sehr plötzlich und unerwartet – und ziehen einen besonderen Bedarf an Pflege nach sich. Gerade in solchen Fällen ist eine umgehende Reaktion nötig, um den Bedürfnissen des Betroffenen nachzukommen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einem Pflegebett. Fällt die Wahl auf ein einzelnes, komplettes Bett, hat dies oft den gesamten Umbau des gewohnten Schlafzimmers zur Folge, besonders wenn der Patient in einer Partnerschaft lebt.

Der Betteinsatz **Sanlift** bietet sich immer dann an, wenn man in seiner häuslichen Umgebung verbleiben möchte oder bei Ehepartnern einer von beiden pflegebedürftig wird und auf das gemeinsame Ehebett nicht verzichtet werden soll oder kann. Ausgestattet mit den Funktionen eines Pflegebettes ersetzt der Betteinsatz **Sanlift** die Liegefläche einer der beiden Seiten des bestehenden Doppelbettes. Der Betteinsatz bietet dem Patienten und den betreuenden Personen den Komfort eines Pflegebettes – und der zu Pflegenden kann in seiner gewohnten häuslichen Umgebung verbleiben.

Standardausstattung

- elektrische Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- kopfseitig Aufsteckhülsen für Aufrichter oder Bettleuchte
- für Liegeflächen 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm

Sanlift Betteinsatz

- 4-geteilte elektrisch verstellbare Liegefläche 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm
- wahlweise Stahlgitterliegefläche oder Holzlattenrost
- elektrische Höhenverstellung von 40 – 80 cm
- elektrisch verstellbare Rücken- und Oberschenkellehne, Unterschenkellehne über Feinstrangung
- zum Einsatz mit wohnlicher Bettumrandung oder in vorhandene Einzel- oder Doppelbetten
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Sanlift Hebesystem

- Hebesystem zur Verwendung mit handelsüblichen Liegeflächen (Holzlattenrosten) 90 x 200 cm oder 100 x 200 cm
- zum Einhängen oder Aufstellen im Bettrahmen
- elektrische Höhenverstellung von 40 – 80 cm über den Handschalter
- kann optional mit einem vorhandenen elektrischen verstellbaren Lattenrost verbunden werden

Zubehör

PRAKTISCH &
VIELSEITIG

Zubehör

von Mühle Müller Pflegebetten





Nachtschränke & Beistelltische



Nachtschrank Dino 1

Nachtschrank Standard

Nachtschrank ohne Bettischplatte und mit fester Rückwand

- 1 Schublade
- 1 offenes Zwischenfach
- 1 Tür – mit innenliegendem Einlegeboden
- fahrbar auf Möbelrolle
d=50 mm 2x gebremste und
2 x ungebremste Rollen

Holz-Dekor: Buche hell,
andere Dekore auf Anfrage

Maße: Breite 500 mm, Tiefe 400 mm,
Höhe 790 mm



Nachtschrank Dino 2

Nachtschrank mit Zusatzfunktion

Nachtschrank mit seitlich ausklappbarer
Bettischplatte

- 1 Schublade
- 1 offenes Zwischenfach,
beidseitig Türen mit innenliegendem
Einlegeboden
- fahrbar auf Möbelrollen

Holz-Dekor: Buche hell,
andere Dekore auf Anfrage

Maße: Breite 530 mm, Tiefe 450 mm,
Höhe 870 mm

Maße Bettischplatte: 615 x 360 mm



Nachtschrank Dino 3

Nachtschrank mit Vollausrüstung

Nachtschrank mit seitlich ausklappbarer
Bettischplatte, höhen- und schrägstell-
bar zum Lesen

- 1 Schublade, beidseitig bedienbar
- 1 offenes Zwischenfach, beidseitig
Türen mit innenliegendem
Einlegeboden
- fahrbar auf Möbelrollen

Holz-Dekor: Buche hell,
andere Dekore auf Anfrage

Maße: Breite 530 mm, Tiefe 450 mm,
Höhe 870 mm

Maße Bettischplatte: 615 x 360 mm

Bettischbeschlag: RAL 7035 lichtgrau

Kleiderwäscheschrank & Möbel



Beistelltisch/ Server

Der elegante Helfer

- stufenlos höhenverstellbar durch Gasdruckfeder
- Ablageplatte
- schwenkbare Bettischplatte mit Stoppleisten
- Doppelaufrollen fahrbar mit Feststellbremse
- große Tischplatte mit kratzfreier Oberfläche und Halteboden



Kleiderwäscheschrank und Anrichten

Ein gutes Pflegezimmer bietet neben einem Pflegebett auch Möbel wie Schränke, Kommoden, Tische und Stühle. So kann dem Patienten mit dem Anspruch an Komfort und würdevolles Wohnen mit speziellen Anforderungen ein heimeliges Umfeld bereitet werden.

Die Pflegezimmer können passend zum Pflegebett und deren Dekorvariante auch mit Möbeln wie Schränken, Kommoden, Stühlen und Tischen ergänzt werden.

Bei Bedarf einer kompletten Zimmereinrichtung, stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Wir entwickeln individuell nach Ihrem Wünschen und Anforderungen ein Raumkonzept mit den passenden Möbeln.

Unter anderem liefern wir Kleiderwäscheschränke mit und ohne Wertfach, Anrichten und Sideboards.

Matratzen



Matratzen für Pflegebetten

Zu unseren Pflegebetten liefern wir eine Auswahl an Matratzen für unterschiedliche Anforderungen und Patientenbedürfnisse. Wir liefern Standard-Pflegebettmatratzen sowie Matratzen für individuelle Patientenbedürfnisse wie Anti-Dekubitus-Matratzen bis hin zu Matratzen für schwergewichtige Patienten und Bewohner.

- Standard-Pflegebettmatratzen (in unterschiedlichen Härtegraden)
- Matratzen für Prävention gegen Dekubitus
- Inkontinenzmatratzen
- Matratzen für schwergewichtige, bariatrische und adipöse Patienten

KOGNIMAT-Bettfluchtmatratze

Das kabellose Bettflucht-Warnsystem für demente und sturzgefährdete Personen. Durch den Einsatz der Kognimat-Matratze kann die Sicherheit und Lebensqualität erhöht werden, da in vielen Fällen auf den Einsatz freiheitsentziehender Maßnahmen verzichtet werden kann.



Aufrichter



Aufrichter mit Triangelgriff

Erleichtert das Aufrichten und Aufsetzen im Pflegebett. Der Aufrichter ermöglicht dem Patienten das selbstständige Hochziehen, Hinsetzen oder auch Aufstehen aus dem Bett. Der Aufrichter kann kopfseitig links oder rechts am Pflegebett angebracht und der Triangelgriff an der Aufrichterstange befestigt werden.

Auch als Funk-Haltegriff mit integriertem Notruf erhältlich, welcher in die vorhandene Rufanlage eingebunden werden kann. Erhöht die Selbstständigkeit und Sicherheit der Bewohner.

Aufrichthilfe mit Aufrollautomatik



Bettleuchte



Angenehmes Licht in jeder Position

Neben dem blendfreien und indirekten Licht einer Allgemeinbeleuchtung ist das Leselicht oder Nachtlicht am Pflegebett von großer Bedeutung. Unsere Bettleuchte bietet Ihren Bewohnern und Patienten ein gutes, bedienerfreundliches und blendfreies Licht.

- Titanfarben
- Höhe 1006 mm
- Ausladung 400 mm
- Flexarm
- inkl. NV-Halogenlampe 12 V / 20 W G4 (auch als LED erhältlich)
- Schnurschalter
inkl. LED-Orientierungslicht „Nachtfindelicht“
- geringe Wärementwicklung am Leuchtenkopf
- doppeltes mattiertes Schutzglas vor dem Leuchtmittel
- Leuchtenkopf um 90° schwenkbar
- Leuchte wird im Aufrichter befestigt
- Schutzkleinspannung
- blendfrei
- attraktives Design
- GS-TÜV Zertifikat, CE-Zeichen

Nachttischleuchte



Flexibles Licht für den Raum

Die Lampe kann auf einem Schrank oder dem Nachttisch eingesetzt werden und eignet sich daher besonders als Lese- oder Nachtlicht.

- Nickel, matt
- Schirm perlatex (abwaschbar) weiß, oval spitz
- Abmessungen Fuß d: 125 mm, Höhe 430 mm
- Metallfassung
- Schnurzwischenschalter
- 1 x E 27 Dulux EL LL 15 W

Evakuierungstuch



Zur schnellen Patientenrettung

Das Evakuierungstuch wird eingesetzt in Einrichtungen mit ständig bettlägerigen Patienten und lässt sich in Rettungssituationen leicht und sicher über Fußböden wie Teppiche, Fliesen oder abwärts führenden Treppen von einer Person aus dem Gefahrenbereich ziehen. An Gurtgriffen der Kopf- und Fußteile sowie der Seiten lässt sich die Matratze leicht aus dem Pflegebett herausziehen.

Das Evakuierungstuch wird einfach unter die Matratze gezogen und kann immobile und liegende Personen einfach in Sicherheit bringen.



Safety Tube



Bestmöglicher Patientenschutz mit integriertem Seitenpolster

Safety Tube, die textile Schutzwanne als geschlossenes System, bietet dem Patienten ein Optimum an Sicherheit und Schutz. Diese Schutzwanne mit Seitengitterpolstern verhindert, dass die Arme, Beine oder Hände des Bewohners durch das Seitengitter rutschen können. Die Anbringung des Schutzes erfolgt über seitliche Spanngurte mit daran angebrachten Steckschnallen.

Der **Safety Tube** ist aus einem hautsympatischen und antibakteriellem Polyestergewebe gefertigt; er kann daher leicht desinfiziert werden und eignet sich für Pflegebetten bis zu einer Länge von 220 cm sowie alle Seitengitterformen mit einer Höhe von 22 bis 28 cm.



Seitengitterpolster



Schutz vor Verletzungen

Das Seitengitterpolster schützt unruhige Patienten vor Verletzungen und kann für fast alle Standardbetten eingesetzt werden. Es ist mit Klett- oder Reißverschluss erhältlich und waschbar.

Das spezielle PVC-Material ist sehr leicht anzubringen und einfach zu reinigen.



Wandabweisrollen



Sicherheit für Wände und Interior

Wandabweisrollen schützen Ihre Wände und die Inneneinrichtung beim Verfahren von Pflegebetten in Räumen.



Aufsteh-/ Bettgriff



Der sichere Griff zum Aufstehen

Dieser einfach zu montierende Bettgriff hilft beim sicheren Aufstehen aus dem Bett. Der Bettgriff wird einfach am Seitenrahmen des Pflegebettes montiert und kann bei Bedarf wieder abgebaut werden. Der Bettgriff kann individuell dort befestigt werden, wo er benötigt wird und lässt sich somit auf die Bedürfnisse des Bewohners oder Patienten anpassen. Durch das Anbringen des Griffes kann sich der Patient beim Aufstehen auf den Griff stützen oder daran festhalten.



Seitengitter klappbar



Flexible Sicherheit

Das Pflegebett lässt sich hinsichtlich verschiedener Seitensicherungs-Varianten auf die Bedürfnisse der Patienten abstimmen. Bei einem Großteil unserer Pflegebetten können unterschiedliche Arten von Seitengittern eingesetzt werden. Die Seitengitter sind als durchgehende sowie als zweigeteilte Seitengitter erhältlich. Darüber hinaus liefern wir feststehende sowie klappbare Seitengitter.

So können die Seitengitter an den Pflegebetten patientenindividuell abgestimmt werden.

Das klappbare Seitengitter dient auch als Absturzsicherung bei Pflegebetten und kann einfach nachträglich montiert werden.

- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Seitengitter feststehend



Festehendes Bett-Seitengitter

Auch feststehende Seitengitter können an unseren Betten fixiert werden, eine nachträgliche Montage ist ebenfalls möglich.

Das feste Seitengitter gibt dem Patienten eine größere Stabilität, zum Beispiel beim Aufstehen aus dem Bett, und sorgt zudem für mehr Sicherheit.



Patientenlifter Pulley



Die neue Hilfe für Pflegepersonal und Patienten

Die Pflege des Patienten, vor allem im Intimbereich, ist für Pfleger und Patienten oft mit großen Komplikationen verbunden. Es bedeutet in vielen Fällen große körperliche Anstrengungen, oft werden 2 Pflegekräfte benötigt, um diesen Aufgaben nach zu kommen.

Die Erleichterung in der Pflege und Hygiene

Mit dem manuell oder motorisch betriebenen Lifter, der zusammen mit dem Aufrichter am Pflegebett verwendet werden kann, wird der Unterkörper des Patienten so in Position gebracht, daß das Gesäß leicht angehoben über der Matratze schwebt.

So ist der gesamte zu pflegende Bereich leicht zugänglich und kann sehr komfortabel und hygienisch einwandfrei versorgt werden.





Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung GmbH & Co.KG

Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



eine marke der werner mühle
metallverarbeitung gmbh & co. kg

Vertrieb

Werner Mühle Metallverarbeitung GmbH & Co.KG

m2 Mühle Pflegebetten
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5165-00
Telefax: +49 (0) 6471 - 5165-029

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de